



ENA CAD


DISKY & BLOČKY



Z PRAVÉHO KOMPOZITU

**Perfektní funkční
a estetická biokompatibilita**

Jednovrstvé a vícevrstvé disky

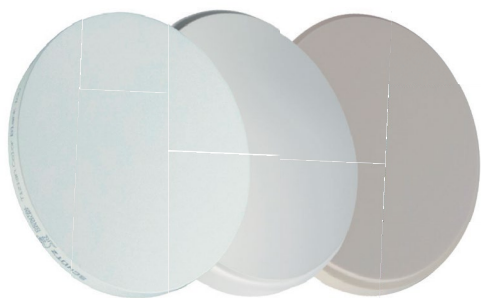

Disky: tloušťka 10/15/20 mm - průměr 98,5 mm.

Jednovrstvé bločky




Bločky: 14,7 x 14,7 x v.18 mm

EnaCad disky a bločky lze použít k výrobě plně anatomických monolitů, inlejí, korunek a struktur pro funkční a estetické rehabilitace i na implantátech. **Vícevrstvé disky navíc nabízejí větší estetickou integraci zejména v předním úseku.**

SLEVA 15 % NA PRVNÍ OBJEDNÁVKU!




 ItalDent


estefit®
GRUPPO
MICERIUM

ItalDent s.r.o. | TEL: 233 55 20 22
Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8
info@italdent.cz | www.italdent.cz

Disky

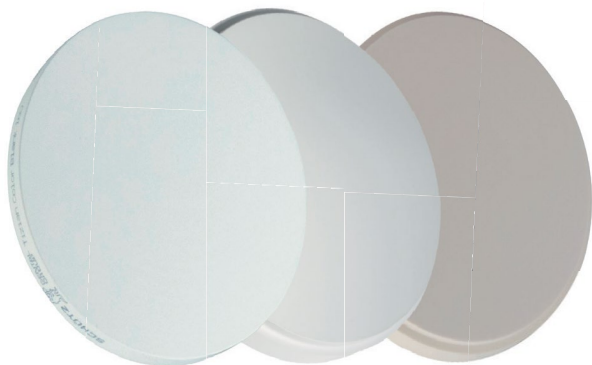

Cena disků od 7.770,- Kč | bločků 5.910,-/6 ks

Fyzikální vlastnosti

Pevnost dle Vickerse	700 MPa*
Modul elasticity	9900 MPa*
Pevnost v ohybu	175 MPa*
Pevnost v tlaku	490 MPa*
Nasákavost vody	15,66yg/mm ³ *
Rozpustnost ve vodě	0,04 gg/mm ³ *
Hustota	1,890 g/cm ³
Obsah plniv	70,5 % (váhy)
Radioopacita	210% (Al-hliník)

Bločky



Fyzikální vlastnosti jsou bližší vlastnostem přirozených zubů, než u jiných výplňových materiálů. Lépe absorbují účinky žvýkacích pohybů, čímž se snižuje riziko zlomení a prasknutí, okluzních a TMK traumat a snižuje se přenos energie na implantáty a kostní struktury.

TCDUD0-15	Ena Cad Disk UD0 15x98,5 mm
TCDUD0-20	Ena Cad Disk UD0 20x98,5 mm
TCDUD0-10	Ena Cad Disk UD0 10x98,5 mm
TCDUD0,5-15	Ena Cad Disk UD0,5 15x98,5 mm
TCDUD0,5-20	Ena Cad Disk UD0,5 20x98,5 mm
TCDUD0,5-10	Ena Cad Disk UD0,5 10x98,5 mm
TCDUD1-15	Ena Cad Disk UD1 15x98,5 mm
TCDUD1-20	Ena Cad Disk UD1 20x98,5 mm
TCDUD1-10	Ena Cad Disk UD1 10x98,5 mm
TCDMUD1-15	Ena Cad Disk Multilayer UD1 15x98,5 mm
TCDMUD1-20	Ena Cad Disk Multilayer UD1 20x98,5 mm
TCDUD2-15	Ena Cad Disk UD2 15x98,5 mm
TCDUD2-20	Ena Cad Disk UD2 20x98,5 mm
TCDUD2-10	Ena Cad Disk UD2 10x98,5 mm
TCDMUD2-15	Ena Cad Disk Multilayer UD2 15x98,5 mm
TCDMUD2-20	Ena Cad Disk Multilayer UD2 20x98,5 mm
TCDUD3-15	Ena Cad Disk UD3 15x98,5 mm
TCDUD3-20	Ena Cad Disk UD3 20x98,5 mm
TCDUD3-10	Ena Cad Disk UD3 10x98,5 mm
TCDMUD3-15	Ena Cad Disk Multilayer UD3 15x98,5 mm
TCDMUD3-20	Ena Cad Disk Multilayer UD3 20x98,5 mm
TCDUD35-15	Ena Cad Disk UD35, 15x98,5 mm
TCDUD35-20	Ena Cad Disk UD35, 20x98,5 mm
TCDUD35-10	Ena Cad Disk UD35, 10x98,5 mm
TCDMUD35-15	Ena Cad Disk Multilayer UD35, 15x98,5 mm
TCDMUD35-20	Ena Cad Disk Multilayer UD35, 20x98,5 mm
TCDMUD35-10	Ena Cad Disk Multilayer UD35, 20x98,5 mm

TCBUD0,5-6	Ena Cad Block S UD0,5 (6 pcs)
TCBUD1-6	Ena Cad Block S UD1 (6 pcs)
TCBUD2-6	Ena Cad Block S UD2 (6 pcs)
TCBUD3-6	Ena Cad Block S UD3 (6 pcs)
TCBUD35-6	Ena Cad Block S UD3,5 (6 pcs)